

# Ръководство на потребителя за масажор за врат Beurer MG 154



- Устройството е предназначено само за употреба в домашни условия, а не за търговска употреба.
- Това устройство може да се използва от деца над 8 години и от хора с намалени физически, сензорни или умствени умения, или липса на опит и знание, при положение, че са под надзор или им е било обяснено как да използват устройството по безопасен начин, и са напълно наясно с рисковете на употреба.
- Ако захранващият кабел на устройството е повреден, трябва да бъде изхвърлен. Ако не може да бъде отстранен, цялото устройство трябва да се изхвърли.
- Устройството има гореща повърхност. Хората, които не са чувствителни към топлина трябва да внимават, когато използват устройството.
- Не поставяйте никакви предмети в отворите или в движещите се части. Уверете се, че движещите се части могат да се движат свободно през цялото време.
- Освен ако не е за работа по поддръжката, като например смяна на батериите, не трябва да отваряте или поправяте устройството, защото безпроблемното функциониране на устройството вече не е гарантирано.

## 1. ВКЛЮЧЕНО В ДОСТАВКАТА:

- 1 масажор за врат
- 1 калъф, който може да се сваля
- 1 кабел USB-C
- 1 копие на тези инструкции за употреба

## **2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И БЕЛЕЖКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:**

### **Предназначение:**

Устройството е създадено за масаж на врат и рамене. Не може да замести медицинско лечение. Не използвайте устройството, ако едно или няколко от следните предупреждения се отнасят за вас. Ако не сте сигурни дали устройството е подходящо за вас, моля консултирайте с вашия личен лекар.

- Не използвайте устройството, ако страдате от медицинска аномалия (например подувания, изгаряния, възпаления) или наранявания в частта на тялото, която ще масажирате (например дискова херния, отворена рана, разкъсвания, капиляри, разширени вени, акне, купероза, херпес или други кожни заболявания).
- В никакъв случай не използвайте масажорът в зоната около сърцето, ако носите пейсмейкър и се консултирайте с вашия лекар относно други части на тялото.
- Не използвайте устройството по време на бременност.
- Не използвайте устройството върху лицето (очи), ларинкса или други особено чувствителни части на тялото.
- Никога не използвайте устройството докато спите.
- Не използвайте устройството след употреба на вещества, които водят до нарушена когнитивна функция (например болкоуспокояващи, алкохол).
- Не използвайте устройството в превозно средство.
- Не използвайте устройството, докато извършвате дейност, при която неочаквана реакция може да бъде опасна.
- Консултирайте се с личния си лекар преди да използвате устройството, ако страдате от сериозно заболяване, ако сте претърпели операция на горната част на тялото или ако носите пейсмейкър, импланти или други помощни средства.
- Консултирайте се с личния си лекар преди да използвате устройството, ако страдате от тромбоза, диабет или болка, чиято причина е неясна.
- Не използвайте устройството за по-дълго от 10 минути (поради риск от прегряване) и оставете устройството да се охлади за поне 10 минути преди да го използвате отново.

### **Токов удар**

- Никога не вдигайте устройство, което е паднало във водата. Изключете мрежовия адаптер веднага. Не изпускате устройството и не го подлагайте на никакви удари.
- Както с всяко друго електрическо устройство, използвайте и това внимателно и предпазливо, за да избегнете опасности от токов удар.
- Използвайте устройството само с предоставения мрежов адаптер и с мрежото напрежение, посочено на мрежовия адаптер.
- Никога не използвайте устройството, ако има видими повреди по устройството, аксесоарите и/или резервните части.
- Не използвайте устройството по време на буря.

- В случай на дефекти или експлоатационни неизправности, веднага изключете устройството и го изключете от стенния контакт. Не опъвайте мрежовия кабел или устройството, за да изключите мрежовия адаптер или щепсела от стенния контакт. Дръжте кабелите далеч от горещи повърхности. Не притискайте, огъвайте или извивайте кабелите. Не вкарвайте игли или каквито и да е остри предмети.
- Уверете се, че устройството и компонентите му (например управлението, мрежов адаптер и кабел) не влизат в контакт с вода, пара или други течности. Използвайте устройството само в сухи стаи (например никога във вана или сауна) и със сухи ръце.

### **Поправяне**

- Само квалифициран персонал може да поправя електрически устройства. Поправките от неквалифицирани хора може да постави потребителите в значителна опасност. За поправки, моля свържете се с отдела за обслужване на клиенти или с оторизиран търговец на дребно.
- Ако мрежовия адаптер или мрежовия кабел е повреден, това трябва да бъде заменено от оторизиран търговец.

### **Риск от пожар**

- Може да има риск от пожар, ако устройството се използва неправилно и ако тези инструкции за употреба се игнорират!
- Никога не използвайте устройството под покривало, като например одеяло или възглавница.
- Никога не използвайте устройството близо до бензин или други лесно запалими вещества.

### **Управление на устройството**

- Устройството трябва да се изключва след всяко използване и преди почистване.
- Не поставяйте пълната си тежест (в седнало, легнало или право положение) върху движещите се части на устройството и не поставяйте никакви предмети върху устройството.
- Не излагайте устройството на високи температури.

### **Бележки относно батериите**

- Ако течност от батерия влезе в контакт с кожата или очите ви, измийте засегнатите зони обилно с вода и потърсете лекарска помощ.
- Ако батерия протече, сложете предпазни ръкавици, за да изхвърлите устройството.
- Пазете батериите от силна топлина.
- **Риск от експлозия!** Не хвърляйте батериите в огън.
- Не разглобявайте, срязвайте или мачкайте батериите.
- За да постигнете възможно най-дълъг експлоатационен живот на батериите, зареждайте батерията докрай поне 2 пъти годишно.
- Батериите трябва да са заредени правилно преди употреба.

### **3. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА**

#### **Зареждане на батерията**

Преди да използвате устройството за пръв път, трябва да го заредите за минимум 3 часа. За да го направите, следвайте стъпките:

1. Премахнете целия опаковъчен материал от устройството.
2. Проверете устройството и USB-C кабела за повреди.
3. Свържете предоставения USB-C кабел в USB-C порта на устройството (5).
4. Свържете другия край на USB-C кабела към USB източник на захранване.
5. Уверете се, че кабелът не представлява опасност от спъване.
6. По време на зареждане LED дисплеят ще свети в червено. Веднага щом видите, че LED дисплеят свети постоянно в бяло, изключете USB-C кабела от устройството и от USB източника на захранване. Батерията е напълно заредена сега. Пълно зареждане на батерията е достатъчно за около 2 часа работа на устройството (на бавна скорост и с изключена топлинна функция).

### **4. УПОТРЕБА**

Ако масажът е болезнен или некомфортен, спрете масажа или променете позицията си или натиска.

**Устройството има опция за автоматично изключване и се изключва автоматично след като е работило 10 минути.**

- Не използвайте функцията за масаж на устройството в продължение на повече от 10 минути. По-дългите масажи могат да доведат до свръхстимулация на мускулите, създавайки напрежение, вместо да подпомогне отпускането им.
- Не поставяйте никоя част от тялото си, особено краката, ръцете и пръстите, между въртящите се масажни глави (1) на устройството.

#### **Стъпка 1: Настройване на устройството**

1. Поставете масажора около врата си.
2. Поставете закопчалката около кръста си и го стегнете отзад, използвайки катарамата.

#### **Стъпка 2: Включете устройството**

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване в продължение на 2 секунди. LED дисплеят ще светне в бяло. Масажните глави ще започнат да се въртят, докато малките масажни глави се движат нагоре и надолу.

#### **Стъпка 3: Нагласете скоростта**

Устройството има две различни настройки за скорост. За да смените настройките на скоростта докато използвате, натиснете за кратко бутона за включване/изключване.

#### **Стъпка 4: Включване на топлина**

Устройството има функция за топлина, която можете да включите в допълнение на масажа. Натиснете бутона за топлина отново, за да изключите опцията за топлина. LED дисплеят ще светне в бяло отново.

### **Стъпка 5: Изключете устройството**

За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване/изключване в продължение на две секунди.

## **5. ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**

### **Почистване**

- Почиствайте устройството, използвайки само посочените начини. В никакъв случай не трябва течност да влиза в устройството, аксесоарите и/или резервните части.
- Малки петна могат да бъдат премахнати като използвате кърпа или влажна гъба и малко деликатен течен препарат за пране, където е необходимо. Не използвайте почистващи продукти на основата на разтворители.
- Не използвайте устройството отново докато всички елементи не изсъхнат напълно.
- За да премахнете калъфа на масажора, отворете ципа, който се намира отзад в зоната на врата. Премахвания се калъф може да се пере само на ръка в хладка вода под 30°C. Калъфът не трябва да се пере в пералня. Моля прегледайте символите за грижа и почистване на етикета, защит на калъфа. НЕ оставяйте калъфа да съхне на слънце.

### **Съхранение**

Ако планирате да не използвате устройството за дълъг период от време, препоръчваме да го съхранявате в оригиналната опаковка в суха среда, като се уверите, че други предмети не са натрупани върху него.


## **6. ИЗХВЪРЛЯНЕ**

### **Изхвърляне на батерии**

Когато изхвърляте батериите, трябва първо да премахнете батериите от устройството. За да го направите, следвайте указанията:

1. Отворете ципа на отделението за батериите.
2. Премахнете корпуса от калъфа от плат.
3. Премахнете закопчалката с кука и примка.
4. Отворете отделението за батерии на корпуса, използвайки отвертка.
5. Изключете щепселната връзка и премахнете батерията.

Използваните и напълно празни батерии трябва да бъдат изхвърлени в обозначените кутии за събиране, в пунктове за рециклиране или при търговци на електроника на дребно. По закон сте длъжни да изхвърляте батериите.

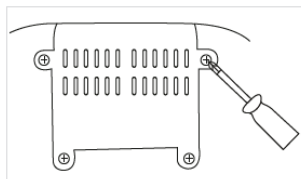

Кодовете по-долу са отпечатани на батерии, съдържащи вредни вещества:

- Pb = Батерията съдържа олово
- Cd = Батерията съдържа кадмий
- Hg = Батерията съдържа живак



Повредените или използвани батерии трябва да бъдат рециклирани в съответствие с Директивата 2006/66/ЕО. Върнете батериите и/или устройството като използвате предоставените съоразения за събиране.

Поради екологични причини не изхвърляйте устройството заедно с битовите отпадъци в края на експлоатационния му живот.

Изхвърляйте устройството в подходящ местен пункт за събиране или рециклиране в държавата ви. Изхвърлете устройството в съответствие с Директивата на ЕО – WEEE (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване). Моля, свържете се с местните власти, отговорни за изхвърлянето на отпадъци, ако имате въпроси относно изхвърлянето.

## 7. ГАРАНЦИЯ/СЕРВИЗ

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта.

Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
  - Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
  - Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
  - Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
  - Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

**Производител:** Beurer GmbH

**Адрес:** Soeflinger Strasse 218  
89077 Ulm, Germany

**Телефон:** +497 313 9890

**Имейл:** [customerservice@beureruk.com](mailto:customerservice@beureruk.com)

Повече информация за продукта ще намерите на [www.polycomp.bg](http://www.polycomp.bg).