

Ръководство на потребителя за шиацу масажна седалка Beurer MG 202



I. Включено в опаковката:

- 1 бр. шиацу масажна седалка Beurer MG 202
- 1 бр. ръководство на потребителя

Проверете целостта на опаковката при доставка на уреда и се уверете, че всички компоненти на устройството са налице. Преди употреба се уверете, че няма видими следи от повреда върху уреда или неговите компоненти. Ако имате съмнения, че устройството е с нарушена цялост, моля свържете се с търговеца от когото сте го закупили.

II. Полезни съвети и инструкции за безопасност:

- Прочетете тези инструкции за безопасност внимателно преди да използвате това устройство. В противен случай рискувате да се нараните или да претърпите материални щети. Запазете това ръководство за по-нататъшна употреба. Ако дадете това устройство на друг, моля предайте им и тези инструкции за употреба.
- Уредът може да се използва от деца над 8 г. и хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит или знания само под надзор или след като са били инструктирани за безопасното използване на уреда и са напълно наясно с произтичащите от това рискове при употреба.
- Уредът не е играчка – пазете го далеч от деца!
- Дръжте опаковката на устройството далеч от обсега на деца – риск от задушаване!
- Почистването и поддръжката на този уред не бива да се извършва от деца без родителски контрол.
- Уредът е само за лична употреба и не е предназначен за медицински или търговски цели.
- Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да се смени. Ако това е невъзможно, уредът трябва да се смени.
- Не пъхайте предмети в отворите на уреда или в движещите се части. Движението на движещите се части трябва да е невъзпрепятствано.
- Не поправяйте уреда сами. Поправки трябва да се извършват само от оторизиран технически персонал. В противен случай гаранцията на уреда става невалидна.
- **Предназначение на уреда:**
 - Това масажно устройство е предназначено за масаж на гърба на хора. Имайте предвид, че това устройство не е заместител на медицинското лечение. Не използвайте масажора, ако едно или повече от изброените в това ръководство предупреждения се отнасят за вас.
- **Не трябва да използвате масажната седалка:**
 - при промени, предизвикани от гръбначни заболявания или наранявания (напр. дискова херния, открити рани);
 - при бременност;
 - по време на сън;
 - в превозно средство;
 - върху животни;

- по време на извършване на дейности, при които ненадейна реакция би била опасна;
- при приемане на вещества, които забавят реакциите (болко успокоителни, алкохол и др.);
- повече от 15 минути (поради риск от прегряване). Оставете уреда да се охлади поне 15 минути преди да го използвате отново.
 - Ако не сте сигурни дали масажорът е подходящ за вас, моля консултирайте са с вашия лекар.
 - **Консултирайте се с лекар преди да използвате уреда:**
- ако страдате от някакво заболяване или се възстановявате от операция в горната част на тялото;
- ако имате поставен пейсмейкър или имплант;
- при тромбози, диабет или болка с неустановен характер.
 - Използвайте устройството само по предназначение и по начина, посочен в настоящите инструкции за употреба. Всяка форма на неправилна употреба може да бъде опасна. Производителят не носи отговорност за щети в резултат на неправилна или небрежна употреба.
 - Преди да свържете устройството към електрическата мрежа, проверете дали местното мрежово напрежение съответства с посоченото напрежение на уреда – риск от токов удар!
 - Не използвайте уреда при видими следи от повреда – риск от токов удар.
 - Никога не използвайте уреда по време на буря – риск от токов удар!
 - Ако по време на употреба възникнат повреди незабавно изключете уреда и го извадете от електрическата мрежа.
 - В никакъв случай не дърпайте кабела и не носете уреда като го държите за кабела – риск от токов удар!
 - Дръжте кабела далеч от горещи повърхности!
 - Не използвайте устройството в близост до вода или във влажни помещения – риск от токов удар! Не мокрете уреда и кабела му.
 - Пипайте уреда и кабела му само със сухи ръце, в сухи стаи, никога в баня, във вана, в сауна или под душа. Никога не използвайте уреда навън.
 - Ако изпуснете уреда във вода никога не бъркайте във водата, за да го извадите – риск от токов удар! Веднага извадете уреда от контакта.
 - Никога не оставяйте уреда включен без надзор, особено в случаите, когато има деца наблизо!
 - Не покривайте уреда с нищо (например одеяла или възглавници).
 - Никога не използвайте уреда в близост до бензин и други лесно запалими течности.
 - Винаги изключвайте уреда след употреба и преди чистене и го вадете от електрическото захранване.
 - При всяка употреба се уверете, че всички движещи се части се движат свободно.
 - Използвайте уреда само на закрито – в сухи помещения, като го пипате само с напълно сухи ръце.
 - Не удряйте и не изпускайте устройството.
 - Циповете на облегалката и върху частта на масажната седалка върху която седате, не трябва да бъдат отваряни. Те са поставени върху масажната седалка по технически производствени причини.
 - Устройството трябва да бъде изключено и извадено от контакта след всяка употреба и преди почистване.
 - Използвайте устройството само в изправено положение и никога не го поставяйте в легнало положение на земята.
 - Не поставяйте цялото си тегло (седнали, легнали или стоейки) върху движещите се части на устройството. Не поставяйте предмети върху устройството.
 - Не излагайте устройството на високи температури.


III. Описание на уреда:

1. Част за масаж на гръб
2. Въртящи се масажни глави
3. Повърхност за сядане
4. Ремъци за пристягане
5. LED индикатор за статус
6. Бутон за Вкл./Изкл./Интензивност
7. Щепсел за захранване

IV. Употреба:

Позициониране на масажната седалка:

1. Поставете седалката в изправено положение върху подходящ стол със седалка и облегалка (стол, диван и др.). Столът трябва да има достатъчно висока облегалка. Уверете се, че повърхността за сядане (3) и частта за масаж на гръба (1) са поставени, така че да имат контакт със стола, дивана и т.н.
2. Ако е необходимо използвайте ремъците за пристягане (4), за да прикрепите масажната седалка към стола/дивана и т.н.
3. Уверете се, че кабелът за захранване не представлява опасност от спъване. Поставете щепсела за захранване (7) в подходящ ел. контакт.

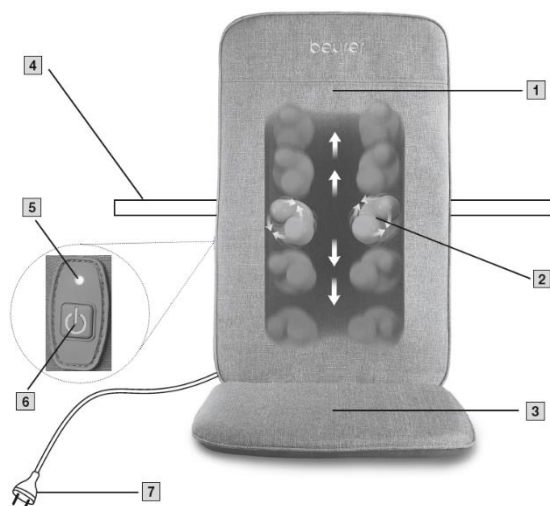

Първоначална употреба:

Внимание:

- Не насилвайте и не поставяйте части от тялото си (особено пръстите ви) между движещите се масажни глави (2) или техните държачи в устройството.
- Внимателно подпрете гръба си на масажирското устройство. Уверете се, че сте заели удобна позиция преди постепенно да пренесете тежестта си върху уреда. Масажът трябва винаги да бъде приятен и релаксиращ. Ако масажът е болезнен или неудобен трябва да прекратите масажа, да промените силата на натиск или да промените позицията на тялото си.

1. **Избор на позицията на седалката:** Седнете удобно и изправени върху масажната седалка. Уверете се, че сте позиционирани в средата и че масажните глави (2) могат да се движат отляво и отдясно на гръбнака ви.
2. **Включване на устройството:** Поставете щепсела в подходящ контакт. LED индикаторът за статус започва да мига в зелено. Сега устройството е в режим на готовност.
3. **Включване на уреда:** Натиснете бутона Бутон за Вкл./Изкл./Интензивност (6). LED индикаторът за статус започва да свети постоянно в зелено. Въртящите се масажни глави (2) се движат бавно нагоре от началната си позиция в най-долната част на гръба и след това се движат нагоре и надолу в частта за масаж на гръб (1).
4. **Регулиране на нивото на интензивност:** Устройството има две нива на интензивност. За да превключите между двете нива на интензивност, натиснете бутона за Вкл./Изкл./Интензивност (6) по време на масажа.
LED индикаторът за статус (5) свети в зелено = ниско ниво на интензивност.
LED индикаторът за статус (5) свети в синьо = високо ниво на интензивност.
5. **Изключване на устройството:** За да изключите устройството, натиснете и задръжте бутона за Вкл./Изкл./Интензивност (6) за 2 секунди. LED индикаторът за статус (5) започва да мига в зелено. Масажните глави бавно се връщат в изходна позиция. Това може да отнеме няколко секунди в зависимост от позицията на масажните глави. Изчакайте, докато масажните глави достигнат началната си позиция. Едва тогава извадете щепсела от контакта. Недейте да изваждате щепсела от контакта, ако масажните глави още се движат. Винаги изчакайте докато масажните глави достигнат началната си позиция.

Важна информация:

Използвайте масажора за макс. 15 минути и след това го оставете да изстине. Дългите масажи могат да доведат до свръх стимулиране на мускулите, създаващо напрежение, вместо да спомага за отпускането. Можете да прекратите масажа по всяко време чрез натискане на бутона за Вкл./Изкл./Интензивност (6).

V. Почистване и поддръжка:

- Изключете уреда преди почистване.
- Не допускайте влизането на вода или друг вид течност в уреда.
- Почиствайте леки замърсявания с кърпа или гъба, навлажнена с малко течен миещ препарат за деликатни тъкани. Не използвайте разтворители.
- Свалящият се може да се пере в перална машина на 40°C. Обърнете внимание на символите на етикета.
- Не използвайте уреда преди да е напълно изсъхнал.
- Ако няма да използвате уреда дълго време, съхранявайте го в оригиналната опаковка на сухо място. Можете да го закачите и в гардероб на закачалка като използвате ушите за закачване на задната страна на уреда.

VI. Възникване на грешки:

Проблем	Причина	Решение
Масажните глави (2) се движат прекалено бавно.	Товарът върху массажните глави е прекалено голям.	Намалете контактното налягане от тялото ви върху главите.
Масажните глави не се движат.	Уредът не е включен в ел. контакт.	Свържете уреда към контакт и го включете от бутона.
	Уредът не е включен.	Включете уреда от бутона за Вкл./Изкл./Интензивност (6).
	Включена е защитата срещу прегряване, уредът е повреден.	Свържете се с оторизиран сервиз.

VII. Регулаторна информация:



Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране.

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС (Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).



Уредът е в съответствие с изискванията на Директива 93/42/ЕИО.



Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда.

VIII. Гаранционни условия:

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата бележка и кратко описание на дефекта. Приложими са следните гаранционни условия:

1. Гаранционният период е 3 години, считано от датата на покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.
2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на гаранцията.
3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи:
 - ❖ Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за употреба).
 - ❖ Опити за поправка от страна на потребителя или неоторизирани трети лица.
 - ❖ Транспортни повреди от производителя към клиента или по време на транспорт до сервизния център.
 - ❖ Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално износване (маншети, батерии).
4. Веуегер не носи отговорност за преки или косвени загуби, предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната гаранционно.

Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg.